

Verzorgingsmateriaal voor je stoma: maatwerk vol mogelijkheden

Goed passend verzorgingsmateriaal maakt het verschil


Elke stoma is uniek. Het is belangrijk dat het verzorgingsmateriaal voor je stoma echt afgestemd is op jouw stoma, jouw leven en jouw wensen. Het maakt uit of je een colostoma, ileostoma of urostoma hebt, of je stoma wat dieper ligt of niet, hoe gevoelig je huid is, wat de consistentie en regelmaat van je ontlasting is, wat jij prettig vindt.

De zoektocht naar jouw ideale verzorgingsmateriaal maak je altijd samen met je stomaverpleegkundige. Hij of zij weet precies waar op gelet moet worden, wat de mogelijkheden zijn, welke accessoires kunnen helpen en waar je de materialen kunt bestellen. Om tot een keuze te komen neemt je stomaverpleegkundige een flink aantal aspecten in overweging - van puur feitelijk medisch tot jouw

persoonlijke omstandigheden. Maar altijd gaat je stomaverpleegkundige uit van dezelfde top 3 aan prioriteiten: het gezond houden van de huid rondom de stoma, het voorkomen van lekkage en gebruiksgemak.

Met de jaren veranderen je leven en je lichaam. Daardoor kan het zijn dat het materiaal waar je nu helemaal tevreden mee bent, over een tijdje toch niet meer voldoet. Dan moet je opnieuw op zoek. Dat kan heel snel gaan en dat kan een zoektocht zijn waarbij je verschillende materialen moet uitproberen. Ook al is dat vervelend, we raden je aan de tijd ervoor te nemen tot je helemaal tevreden bent. Er is veel en steeds meer mogelijk. En het juiste materiaal kan enorm bijdragen aan je zelfvertrouwen en daarmee aan een kwalitatief beter leven.

Hier kijkt je stomaverpleegkundige allemaal naar bij het helpen kiezen voor het juiste stomaverzorgingsmateriaal.

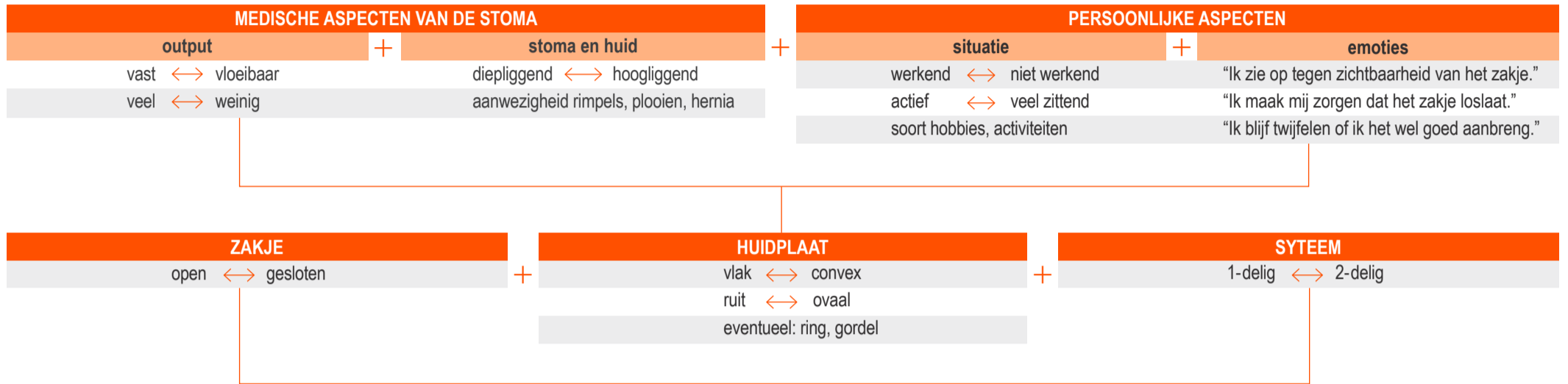

DANSAC NOVA

Ruitvormige huidplaat van bijzonder huidvriendelijk materiaal, die zekerheid biedt dankzij de goede hechting en absorptievermogen.

Verkrijgbaar als:

- 1 en 2-delig systeem met open en gesloten zakje
- urostoma-systeem
- vlakke of convex huidplaat

Ook voor specifieke zorg: kinderlijn, high output, post-op materiaal.

DANSAC NOVALIFE

Ovale huidplaat van bijzonder huidvriendelijk materiaal, met zekere hechting en absorptie, die in het bijzonder geschikt is voor de opvang van **vastere vormen van ontlasting**.

Discreet omdat het zakje lager wordt gedragen en minder afhangt van de bovenkant, is het minder zichtbaar. Ook is de sluiting van het open zakje discreet weggewerkt.

Verkrijgbaar als:

- 1-delig systeem met open en gesloten zakje, met of zonder kijkvenster
- 2-delig systeem met open en gesloten zakje
- vlakke, soft convex of convex huidplaat

DANSAC NOVALIFE GX+

Ovale huidplaat met zekere hechting die de huid extra beschermt tegen **dunnere, agressievere vormen van ontlasting**.

Discreet omdat het zakje lager wordt gedragen en minder afhangt van de bovenkant, is het minder zichtbaar. Ook is de sluiting van het open zakje discreet weggewerkt.

Verkrijgbaar als:

- 1-delig systeem met open zakje met kijkvenster
- 2-delig systeem met gesloten en open zakje
- vlakke of convex huidplaat

DE PRODUCTEN VAN DANSAC ZIJN ALTIJD

- Eenvoudig te verwijderen zonder plakresten achter te laten.
- Voorzien van een krachtig filter voor de afvoer van darmgassen en het neutraliseren van geur.
- Comfortabel te dragen door de grote mate van flexibiliteit van de huidplaat en het prettige zachte materiaal van de zakjes.
- Voorzien van een gebruiksvriendelijke en veilige koppeling voor het 2-delige systeem waarmee het zakje hoor- en zichtbaar goed op de huidplaat klikt.
- Makkelijk in het gebruik.
- Verkrijgbaar via en in overleg met je stomaverpleegkundige.

Open of gesloten?

Bij een open systeem heeft het zakje een opening waardoor je het tussendoor kunt legen. Bij een gesloten systeem kan dit niet.



Vlak of Convex?

Convex huidplaten hebben een bolling waardoor de huid rond een dieperliggend stoma wat wordt teruggeduwd en de stoma iets omhoog komt. Daardoor wordt het risico op lekkage beperkt.



Convex of Soft Convex?

Soft Convex huidplaten zijn naast bol ook zeer flexibel. Daardoor sluiten ze perfect aan op de rondingen van het lichaam en vullen ze eventuele plooiën en rimpels op om het risico op lekkage te minimaliseren.



1 of 2-delig?

• Bij een 1-delig systeem zit het zakje vast aan de huidplaat. Als je je materiaal vervangt, vervang je dus alles.
• Bij een 2-delig systeem zijn de huidplaat en zakjes los van elkaar. Je vervangt de zakjes vaker dan de huidplaat.



Ruit of ovaal?

Er zijn huidplaten in verschillende vormen en maten. De huid rondom de stoma is bepalend voor wat de voorkeur heeft. Bij ovale huidplaten zit de opening aan de bovenkant waardoor het zakje lager valt en daardoor discreter is.



Kijkvenster?

Door het doorzichtige kijkvenster kun je goed zien of de opening van de huidplaat mooi rond je stoma zit.